



Sauerstoff gelöst C

M292

10 - 800 µg/L O₂ ^{c)}O₂

Rhodazin D TM

Instrumentenspezifische Informationen

Der Test kann auf den folgenden Geräten durchgeführt werden. Zusätzlich sind die benötigte Küvette und der Absorptionsbereich der Photometer angegeben.

Geräte	Küvette	λ	Messbereich
MD 100, MD 110, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect	ø 13 mm	530 nm	10 - 800 µg/L O ₂ ^{c)}
XD 7000, XD 7500	ø 13 mm	547 nm	10 - 1100 µg/L O ₂ ^{c)}

Material

Benötigtes Material (zum Teil optional):

Reagenzien	Form/Menge	Bestell-Nr.
Vacu-vial Sauerstoff Test Kit	1 Satz	380450

Es wird außerdem folgendes Zubehör benötigt.

Zubehör	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
Adapter für Rundküvetten 13 mm	1 St.	19802192
Adapter (13 mm) MultiDirect für Vacu-vial	1 St.	192075

Anwendungsbereich

- Kesselwasser

Vorbereitung

1. Lesen Sie vor der Durchführung des Testes unbedingt die Original-Arbeitsanweisung und die Sicherheitshinweise, welche dem Testsatz beiliegen (MSDS sind verfügbar auf der Homepage www.chemetrics.com).




Anmerkungen

1. Bei dieser Methode handelt es sich um ein Produkt von CHEMetrics. Der in diesem Photometer angegebene Messbereich und die verwendete Wellenlänge kann jedoch von den CHEMetrics-Angaben abweichen.
2. Vacu-Vials® im Dunkeln bei Raumtemperatur aufbewahren.
3. Vacu-Vials® ist ein geschütztes Warenzeichen der Firma CHEMetrics, inc. / Calverton, U.S.A.




Durchführung der Bestimmung Sauerstoff, gelöst mit Vacu Vials® K-7553


Die Methode im Gerät auswählen.

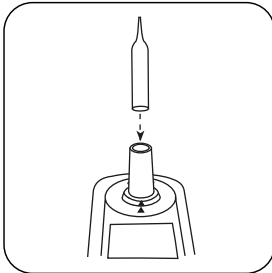


Die **Zero-Ampulle** in den Messschacht stellen.

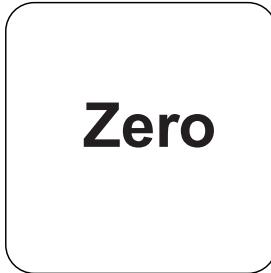


Taste **ZERO** drücken.

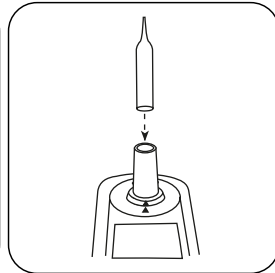


Zero-Ampulle aus dem Messschacht nehmen.

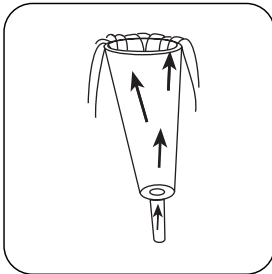


Probenahmegefäß mehrere Minuten von unten nach oben mit Testwasser durchströmen lassen, um Luftblasen zu entfernen.

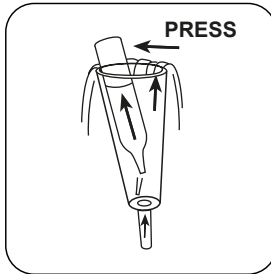


Eine Vacu-vial® Ampulle im Probenahmegefäß platzieren. Die Ampulenspitze durch leichtes Drücken gegen die Gefäßwand abbrechen. Die komplette Füllung der Ampulle abwarten.

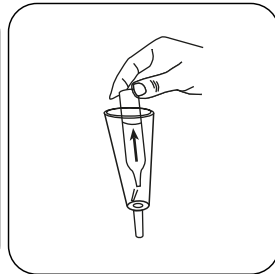


Die volle Ampulle anschließend zügig, mit der Spitze nach unten, aus dem Probenahmegefäß nehmen.

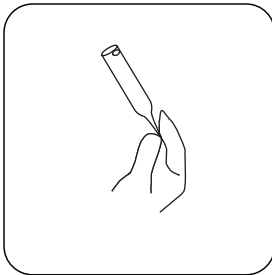


Die Öffnung mit einem Finger verschließen, um Luftkontakt zu vermeiden.

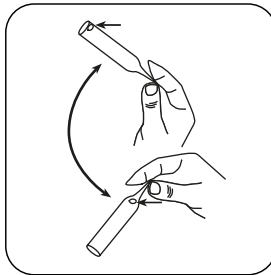

Die Ampulle mehrfach umschwenken.

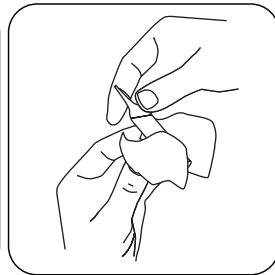

Die Ampulle von außen trocknen.

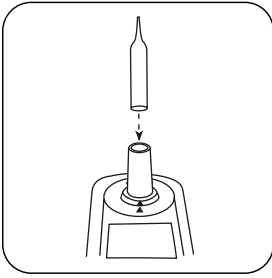


Die Ampulle in den Messschacht stellen.

Taste **TEST** (XD: **START**) drücken.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L Sauerstoff.

Test

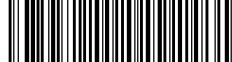

Chemische Methode

Rhodazin D TM

Appendix

Kalibrierfunktion für Photometer von Fremdherstellern

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

	ø 13 mm
a	$-2.60239 \cdot 10^{+1}$
b	$9.19343 \cdot 10^{+2}$
c	
d	
e	
f	

Abgeleitet von

ASTM D 5543-15

⁹⁾ MultiDirect: Adapter für Vacu-vials[®] erforderlich (Bestell-Nr. 19 20 75)