

50 T 二氧化氯

M119

0.05 - 1 mg/L ClO₂

DPD / 甘氨酸

儀器的具體信息

測試可以在以下設備上執行。此外還指出了所需的比色杯和光度計的吸收範圍。

儀器类型	比色皿	λ	測量范围
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	□ 50 mm	510 nm	0.05 - 1 mg/L ClO ₂


材料

所需材料 (部分可選) :

试剂	包装单位	货号
DPD No.1	片剂 / 100	511050BT
DPD No.1	片剂 / 250	511051BT
DPD No.1	片剂 / 500	511052BT
DPD No.3	片剂 / 100	511080BT
DPD No.3	片剂 / 250	511081BT
DPD No.3	片剂 / 500	511082BT
DPD No.1 高钙 ^{e)}	片剂 / 100	515740BT
DPD No.1 高钙 ^{e)}	片剂 / 250	515741BT
DPD No.1 高钙 ^{e)}	片剂 / 500	515742BT
DPD No.3 高钙 ^{e)}	片剂 / 100	515730BT
DPD No.3 高钙 ^{e)}	片剂 / 250	515731BT
DPD No.3 高钙 ^{e)}	片剂 / 500	515732BT
套件 DPD No.1/No.3 [#]	各100次	517711BT
套件 DPD No.1/No.3 [#]	各250次	517712BT
套件 DPD No.1/甘氨酸 [#]	各100次	517731BT
套件 DPD No.1/甘氨酸 [#]	各250次	517732BT
套件 DPD No.1/No .3 高钙 [#]	各100次	517781BT
套件 DPD No.1/No .3 高钙 [#]	各250次	517782BT
甘氨酸 ^{f)}	片剂 / 100	512170BT
甘氨酸 ^{f)}	片剂 / 250	512171BT
DPD No.3 Evo	片剂 / 100	511420BT
DPD No.3 Evo	片剂 / 250	511421BT
DPD No.3 Evo	片剂 / 500	511422BT

应用列表

- 污水处理
- 消毒控制
- 锅炉水
- 冷却水
- 原水处理
- 泳池水质控制
- 饮用水处理

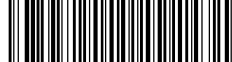

取样

1. 在样本制备中，通过移液和摇动来避免的排气。
2. 取样后必须立即进行分析。

准备

1. 清洗比色杯：
由于许多家用清洁剂（例如洗碗用洗涤剂）含有还原剂，所以测定的二氧化氯结果可能会不足。为了排除这种测量误差，玻璃器皿应无氯。为此，将玻璃器皿在次氯酸钠溶液（0.1 g/L）下存放 1 小时，然后用去离子水（软化水）彻底冲洗。
2. 在分析前（用 0.5 mol/l 硫酸或 1 mol/l 氢氧化钠溶液）必须将强碱性或酸性水的 pH 范围调节到 6 和 7 之间。

备注

1. EVO片剂可以作为相应标准片剂的替代品（如DPD No.3 EVO代替DPD No.3）。







进行测定 二氧化氯, 无氯存在, 片剂法

选择设备中的方法。


对于此方法, 不必每次都在以下设备上上进行零测量: XD 7000, XD 7500

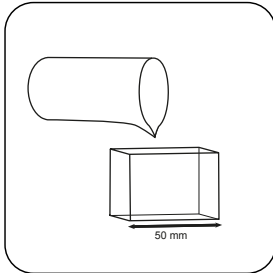


用样本填充 **50 mm** 比色杯。

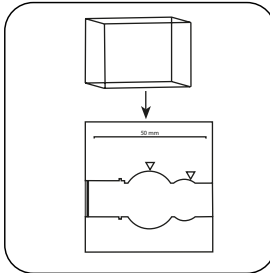


将样本比色杯放入测量轴中。注意定位。

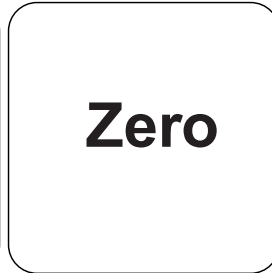


按下 **ZERO** 按钮。

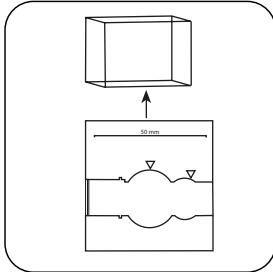

从测量轴上取下比色杯。

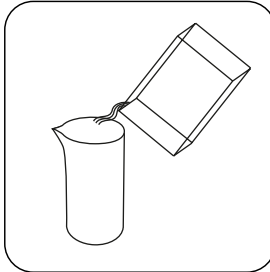


倒空比色杯。

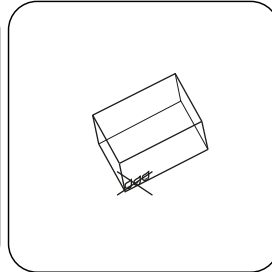


干燥比色杯。


对于不需要 **ZERO** 测量的设备, 从这里开始。

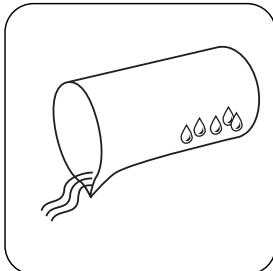


用少量样本冲洗合适的样本容器并倒空。

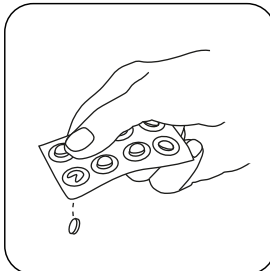


加入 **DPD No. 1** 片剂。

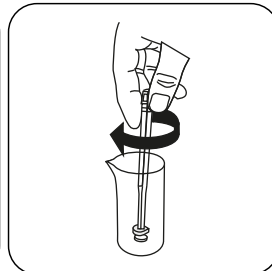


用轻微的扭转压碎片剂。

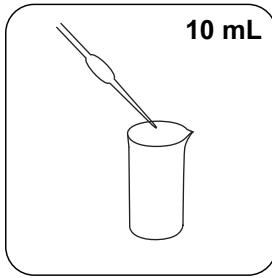


加入 10 mL 样本。

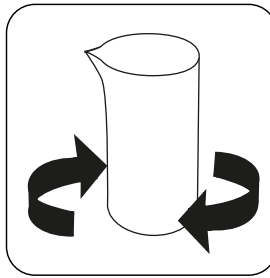


通过旋转溶解试剂。

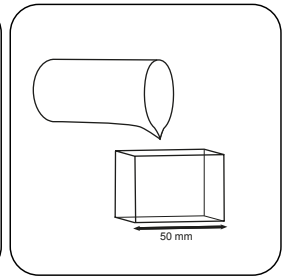

用样本填充 50 mm 比色杯。

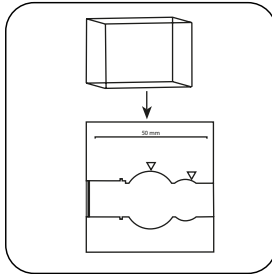

将样本比色杯放入测量轴中。注意定位。

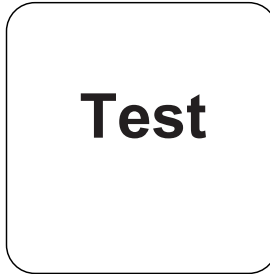

按下 **TEST (XD: START)** 按钮。

结果在显示屏上显示为 mg / l 二氧化氯。



化学方法

DPD / 甘氨酸

附录

第三方光度计校准功能

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

□ 50 mm

a	$1.25575 \cdot 10^{-2}$
b	$3.13095 \cdot 10^{-6}$
c	
d	
e	
f	

干扰说明

持续干扰

1. 存在于样本中的所有氧化剂都导致多重结果。

可消除干扰

1. 高于 19 mg/L 二氧化氯的浓度可导致测量范围内的结果高达 0 mg/L。在这种情况下应用不含二氧化氯的水稀释水样。将 10 ml 稀释的样本与试剂混合并重复测量（可置信度测试）。
2. 浑浊：对于高钙含量*（和/或高电导率*）的样本，使用 DPD 编号1 试剂片可能会导致样本浑浊和相关的测量误差。在这种情况下，可选用试剂片 DPD 编号1 高钙。
*不能给出精确值，因为浑浊的形成取决于样本水的类型和组成。

源于

DIN 38408, 第 5 部分

^{*)} 替代试剂，取代 DPD No.1/No.3 试剂，用于由高浓度钙离子和/或高电导率引起的浑浊水样分析 | ^{*)} 附加试剂，用于含氯水样，进行溴，二氧化氯和臭氧的测定分析 | ^{*)} i 含搅拌棒，10cm