



Dioxyde de chlore T

M120

0.02 - 11 mg/L ClO₂

CLO2

DPD / Glycine

Informations spécifiques à l'instrument

Le test peut être effectué sur les appareils suivants. De plus, la cuvette requise et la plage d'absorption du photomètre sont indiquées.

Appareils	Cuvette	λ	Gamme de mesure
MD 100, MD 110, MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	ø 24 mm	530 nm	0.02 - 11 mg/L ClO ₂
MD50	ø 24 mm	530 nm	0.04 - 11 mg/L ClO ₂
XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	510 nm	0.02 - 11 mg/L ClO ₂
SpectroDirect	ø 24 mm	510 nm	0.05 - 2.5 mg/L ClO ₂


Matériel

Matériel requis (partiellement optionnel):

Réactifs	Pack contenant	Code
DPD N°1	Pastilles / 100	511050BT
DPD N° 1	Pastilles / 250	511051BT
DPD N° 1	Pastilles / 500	511052BT
DPD N° 3	Pastilles / 100	511080BT
DPD N° 3	Pastilles / 250	511081BT
DPD N° 3	Pastilles / 500	511082BT
Glycine ⁰⁾	Pastilles / 100	512170BT
Glycine ⁰⁾	Pastilles / 250	512171BT
DPD N° 3 High Calcium ^{e)}	Pastilles / 100	515730BT
DPD N° 3 High Calcium ^{e)}	Pastilles / 250	515731BT
DPD N° 3 High Calcium ^{e)}	Pastilles / 500	515732BT
DPD N° 1 High Calcium ^{e)}	Pastilles / 100	515740BT
DPD N° 1 High Calcium ^{e)}	Pastilles / 250	515741BT
DPD N° 1 High Calcium ^{e)}	Pastilles / 500	515742BT
Kit DPD N° 1/N° 3 [#]	100 chacun	517711BT
Kit DPD N° 1/N° 3 [#]	250 chacun	517712BT
Kit DPD N° 1/Glycine [#]	100 chacun	517731BT
Kit DPD N° 1/Glycine [#]	250 chacun	517732BT
Kit DPD N° 1/N° 3 High Calcium [#]	100 chacun	517781BT
Kit DPD N° 1/N° 3 High Calcium [#]	250 chacun	517782BT
DPD N° 3 Evo	Pastilles / 100	511420BT
DPD N° 3 Evo	Pastilles / 250	511421BT
DPD N° 3 Evo	Pastilles / 500	511422BT

Liste d'applications

- Traitement des eaux usées
- Contrôle de la désinfection
- Eau de chaudière
- Eau de refroidissement
- Traitement de l'eau brute
- Contrôle de l'eau de la piscine
- Traitement de l'eau potable

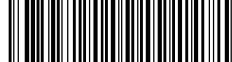

Échantillonnage

1. Lors de la préparation de l'échantillon, il faudra éviter le dégazage, par ex. par pipetage ou agitation.
2. L'analyse devra avoir lieu immédiatement après le prélèvement de l'échantillon.

Préparation

1. Nettoyage des cuvettes :
Beaucoup de produits de nettoyage domestiques (par ex. liquide vaisselle) contenant des agents réducteurs, il est possible que lors de la quantification du Dioxyde de chlore, les résultats soient plus bas. Pour exclure ces erreurs, les instruments en verre utilisés devraient être insensibles aux effets du chlore. Pour ce faire, il convient de laisser les instruments en verre pendant une heure dans une solution d'hypochlorite de sodium (0,1 g/L) et de bien les rincer ensuite à l'eau déminéralisée (eau entièrement dessalée).
2. Avant l'analyse, les eaux fortement alcalines ou acides devraient être ajustées sur un pH compris entre 6 et 7 (avec 0,5 mol/l d'acide sulfurique ou 1 mol/l de soude caustique).

Indication

1. Les pastilles EVO peuvent être utilisées en remplacement de la pastille standard correspondante (par exemple, DPD n° 3 EVO au lieu de DPD n° 3).





Réalisation de la quantification Dioxyde de chlore, en l'absence de chlore avec pastille


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.

Sélectionnez également la quantification : sans chlore


Pour cette méthode, il n'est pas nécessaire d'effectuer une mesure ZERO à chaque fois sur les appareils suivants : XD 7000, XD 7500




Remplissez une cuvette de 24 mm de **10 mL d'échantillon**.

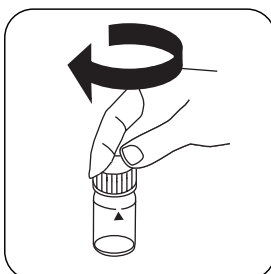


Fermez la(les) cuvette(s).

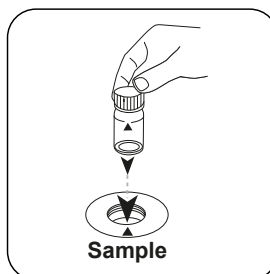


Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.

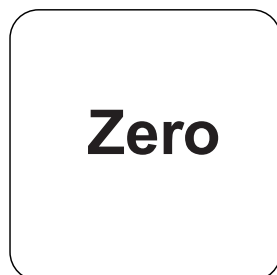

Appuyez sur la touche **ZERO**.

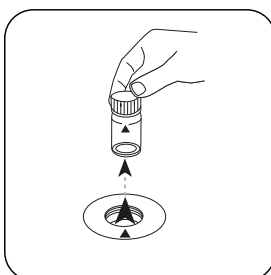


Retirez la cuvette de la chambre de mesure.

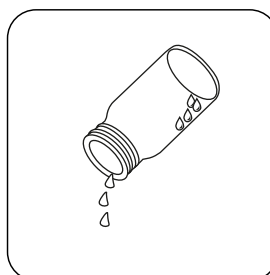


Videz pratiquement la cuvette en y laissant quelques gouttes.

Sur les appareils ne nécessitant **aucune mesure ZÉRO**, commencez ici.

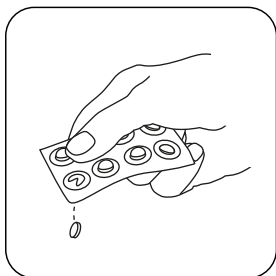


Ajoutez une **pastille de DPD No.1**.

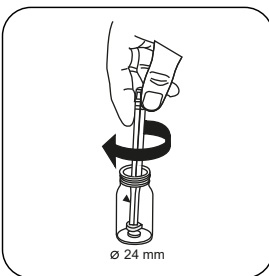


Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.




Remplissez la cuvette jusqu'au **repère de 10 mL** en y versant l'**échantillon**.

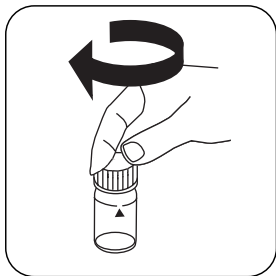


Fermez la(les) cuvette(s).

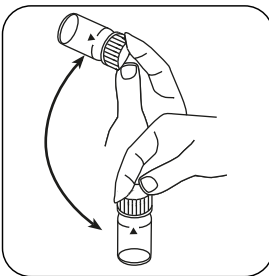

Dissolvez la(les) pastille(s) en mettant le tube plusieurs fois à l'envers.

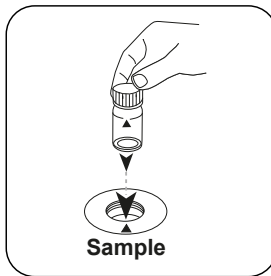


Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.

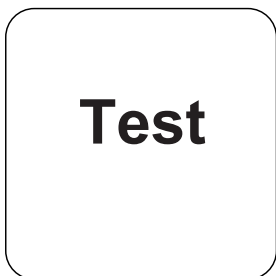

Appuyez sur la touche **TEST (XD: START)**.

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L dioxyde de chlore.

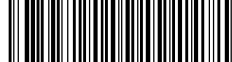

Réalisation de la quantification Dioxyde de chlore, en présence de chlore avec pastille


Sélectionnez la méthode sur l'appareil.

Sélectionnez également la quantification : en présence de chlore


Pour cette méthode, il n'est pas nécessaire d'effectuer une mesure ZERO à chaque fois sur les appareils suivants : XD 7000, XD 7500




Remplissez une cuvette de 24 mm de **10 mL d'échantillon**.

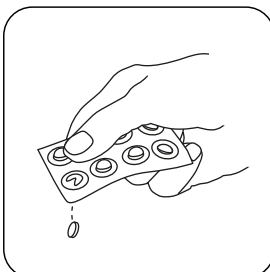


Ajoutez une **pastille de GLYCINE**.

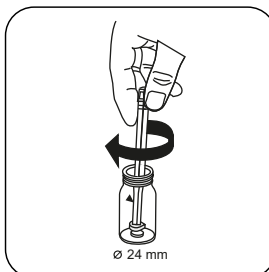


Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.

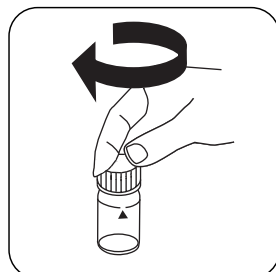


Fermez la(les) cuvette(s).

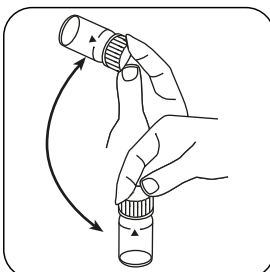


Dissolvez la(les) pastille(s) en mettant le tube plusieurs fois à l'envers.

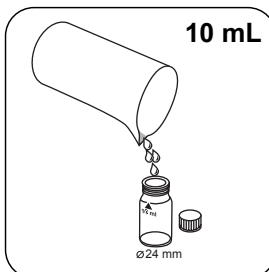


Remplissez une **deuxième cuvette de 10 mL d'échantillon**.

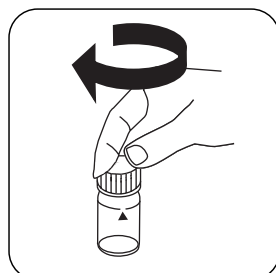


Fermez la(les) cuvette(s).

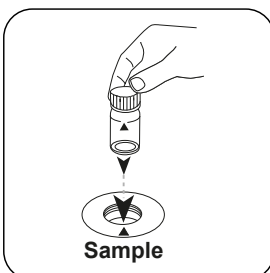

Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.

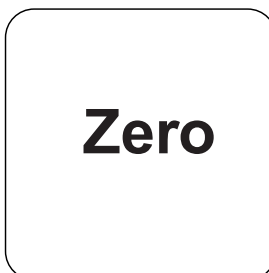

Appuyez sur la touche **ZERO**.

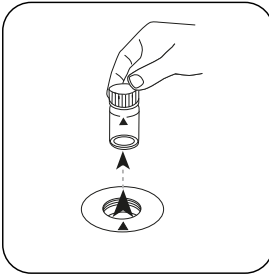


Retirez la cuvette de la chambre de mesure.




Videz la cuvette.


Sur les appareils ne nécessitant **aucune mesure ZÉRO**, commencez ici.

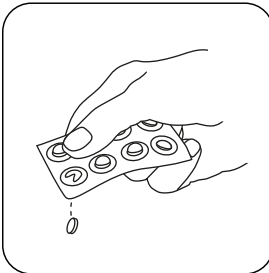


Ajoutez une **pastille de DPD No. 1**.

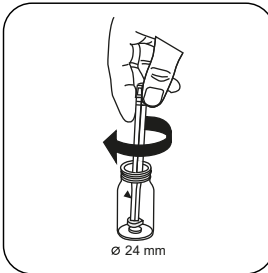


Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.

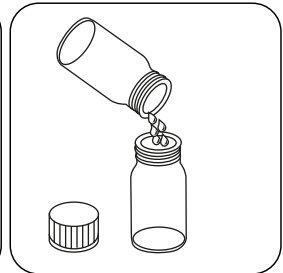


Versez la **solution de Glycine** préparée dans la cuvette préparée.

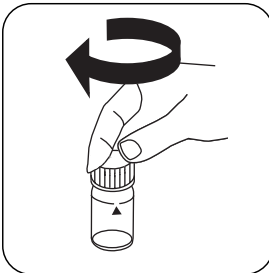

Fermez la(les) cuvette(s).

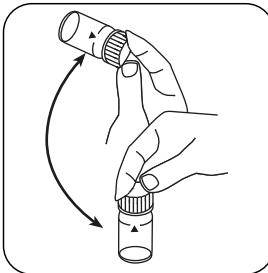

Dissolvez la(les) pastille(s) en mettant le tube plusieurs fois à l'envers.

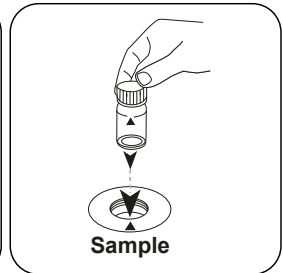

Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.




Test


Appuyez sur la touche
TEST (XD: **START**).

Retirez la cuvette de la
chambre de mesure.


Nettoyez à fond la cuvette et
le couvercle de la cuvette.

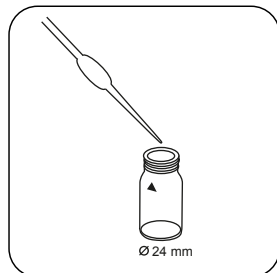

Versez dans la cuvette
quelques gouttes d'échan-
tillon.

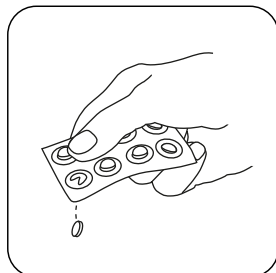


Ajoutez une **pastille de
DPD No. 1**.

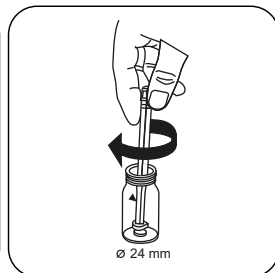


Écrasez la(les) pastille(s) en
la(les) tournant un peu.




Remplissez la cuvette
jusqu'au **repère de 10 mL**
en y versant l'**échantillon**.

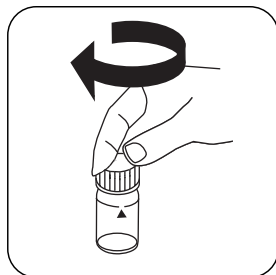


Fermez la(les) cuvette(s).

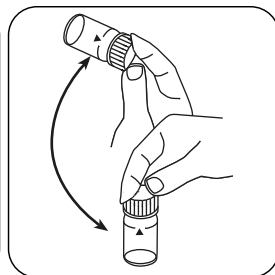


Dissolvez la(les) pastille(s)
en mettant le tube plusieurs
fois à l'envers.

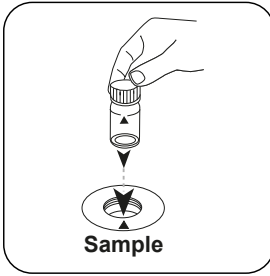


Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.

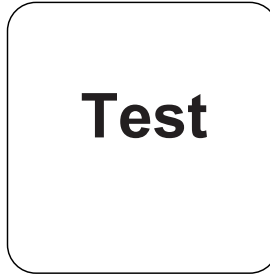


Appuyez sur la touche **TEST** (XD: **START**).

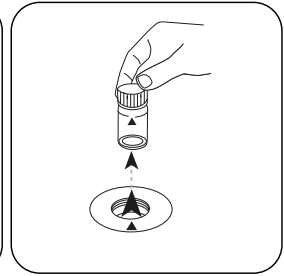


Retirez la cuvette de la chambre de mesure.

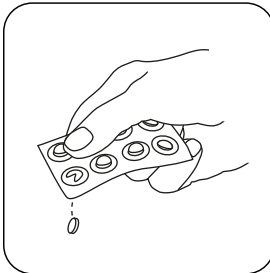


Ajoutez une **pastille de DPD No.3**.

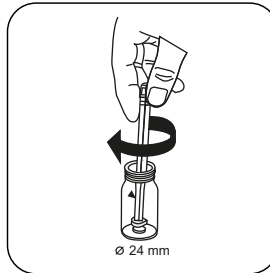


Écrasez la(les) pastille(s) en la(les) tournant un peu.

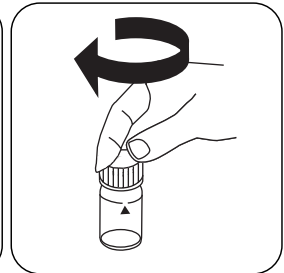


Fermez la(les) cuvette(s).

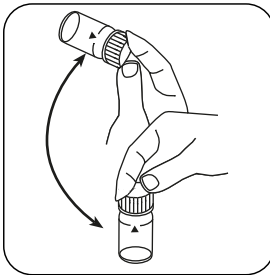



Dissolvez la(les) pastille(s) en mettant le tube plusieurs fois à l'envers.

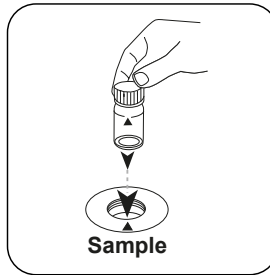

Placez la **cuvette réservée à l'échantillon** dans la chambre de mesure. Attention à la positionner correctement.

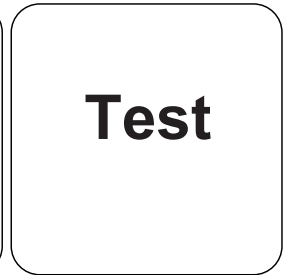

Appuyez sur la touche **TEST** (XD: **START**).

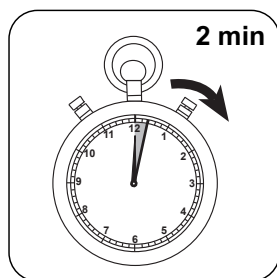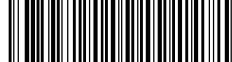

Attendez la fin du **temps de réaction de 2 minute(s)** .

À l'issue du temps de réaction, la mesure est effectuée automatiquement.

Le résultat s'affiche à l'écran en mg/L dioxyde de chlore.

Analyses

Le tableau suivant identifie les valeurs de sortie qui peuvent être converties en d'autres formes de citation.

Unité	Formes de citation	Facteur de conversion
mg/l	ClO ₂	1
mg/l	Cl ₂ frei	0.525
mg/l	Cl ₂ geb.	0.525
mg/l	ges. Cl ₂	0.525

Méthode chimique

DPD / Glycine

Appendice

Fonction de calibrage pour les photomètres de tiers

Conc. = a + b•Abs + c•Abs² + d•Abs³ + e•Abs⁴ + f•Abs⁵

	ø 24 mm	□ 10 mm
a	-8.24762 • 10 ⁻²	-8.24762 • 10 ⁻²
b	3.33567 • 10 ⁻⁰	7.17169 • 10 ⁻⁰
c	-1.16192 • 10 ⁻¹	-5.37098 • 10 ⁻¹
d	1.95263 • 10 ⁻¹	1.9406 • 10 ⁺⁰
e		
f		

Interférences

Interférences persistantes

1. Les agents oxydants contenus dans les échantillons entraînent tous des résultats plus élevés.

Interférences exclues

1. Les concentrations de dioxyde de chlore supérieures à 19 mg/L peuvent donner des résultats dans la plage de mesure allant jusqu'à 0 mg/L. Dans ce cas, diluez l'échantillon d'eau en utilisant de l'eau exempte de dioxyde de chlore. Le réactif est ajouté à 10 ml d'échantillon dilué. Ensuite, la mesure est répétée.



Dérivé de

DIN 38408, 5è partie

^{a)}autre réactif, utilisé à la place de DPD No.1/3 en cas de turbidité dans l'échantillon d'eau due à une concentration élevée de calcium et/ou une conductivité élevée | ^{b)}nécessaire pour la détermination de brome, dioxyde de chlore et ozone en présence de chlore | ^{c)} agitateur inclus