



Bakır T

M150

0.05 - 5 mg/L Cu^{a)}

Cu

Biquinoline

Enstrümana özel bilgi

Test, aşağıdaki cihazlarda gerçekleştirilebilir. Ek olarak, gerekli küvet ve fotometrenin emilim aralığı belirtilmiştir.

Cihazlar	Küvet	λ	Ölçüm Aralığı
MD 100, MD 110, MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 600, PM 620, PM 630, Test Kiti	ø 24 mm	560 nm	0.05 - 5 mg/L Cu ^{a)}
MD50	ø 24 mm	555 nm	0.05 - 5 mg/L Cu ^{a)}
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	559 nm	0.05 - 5 mg/L Cu ^{a)}

Malzeme

Gerekli materyal (kısmen isteğe bağlı):

Ayırıcılar	Paketleme Birimi	Ürün No
Bakır No. 1	Tablet / 100	513550BT
Bakır No. 1	Tablet / 250	513551BT
Bakır No. 2	Tablet / 100	513560BT
Bakır No. 2	Tablet / 250	513561BT
Set bakır No. 1/No. 2 [#]	her bir 100	517691BT
Set bakır No. 1/No. 2 [#]	her bir 250	517692BT
ValidCheck Bakır 2 mg/l	1 adetler	48141525

Uygulama Listesi

- Soğutma Suları
- Kazan Suları
- Atık Su Arıtma
- Havuz Suyu Kontrol
- İçme Suyu Arıtma
- Galvanizasyon

Hazırlık

1. Analizden önce aşırı alkali veya asidik suların pH değeri 4 ile 6 arasında ayarlanmalıdır.



Tespitin uygulanması Bakır, tabletle birlikte serbest


Cihazda metot seçin.

Buna ek olarak tespiti seçin: serbest


Bu yöntem için, aşağıdaki cihazlarda her seferinde SIFIR ölçümünün yapılması gerekmez: XD 7000, XD 7500




24 mm'lik küveti **10 mL numune** ile doldurun.

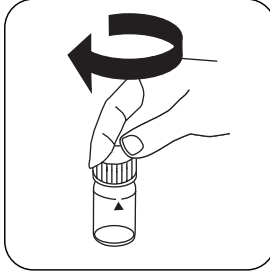


Küveti(küvetleri) kapatın.

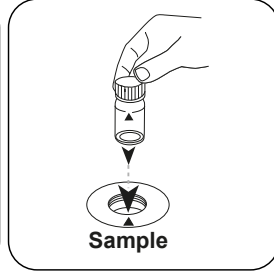

Numune küvetini ölçüm haznesine koyun. Doğru konumlandırılmasına dikkat edin.

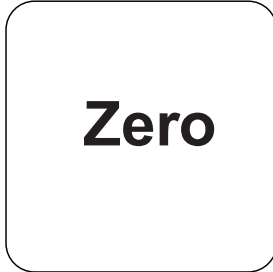


ZERO tuşuna basın.

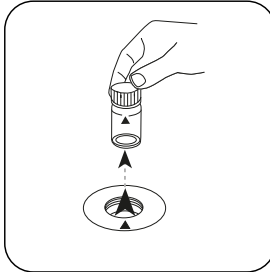


Küveti ölçüm haznesinden alın.


ZERO ölçümü gerektirmeyen cihazlarda buradan başlayın.

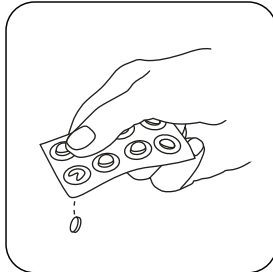

COPPER No. 1 tablet ilave edin.

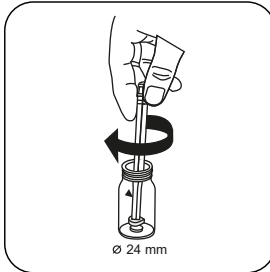


Tableti(tabletleri) hafifçe döndürerek ezin.

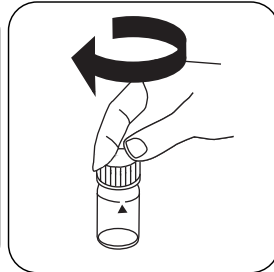


Küveti(küvetleri) kapatın.




Tableti(tabletleri) sallayarak çözdürün.

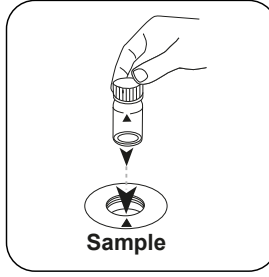

Numune küvetini ölçüm haznesine koyun. Doğru konumlandırılmasına dikkat edin.

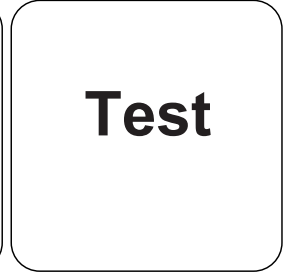

TEST (XD: **START**) tuşuna basın.

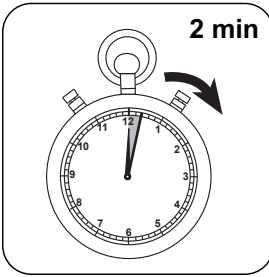

2 dakika tepkime süresi bekleyin.

Tepkime süresinin sona ermesinden sonra ölçüm otomatik gerçekleşir.

Ekranda sonuç mg/L serbest bakır cinsinden belirlir.



Tespitin uygulanması Bakır, tabletle birlikte toplam


Cihazda metot seçin.

Buna ek olarak tespiti seçin: toplam


Bu yöntem için, aşağıdaki cihazlarda her seferinde SIFIR ölçümünün yapılması gerekmez: XD 7000, XD 7500




24 mm'lik küveti **10 mL numune** ile doldurun.

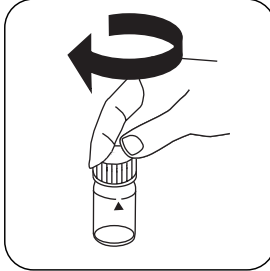


Küveti(küvetleri) kapatın.

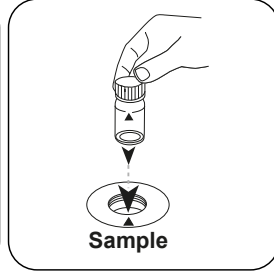

Numune küvetini ölçüm haznesine koyun. Doğru konumlandırılmasına dikkat edin.

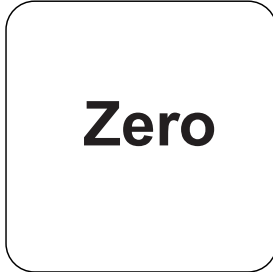


ZERO tuşuna basın.

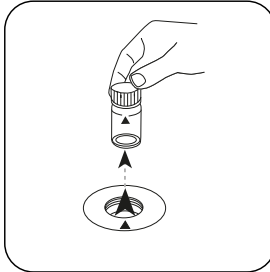


Küveti ölçüm haznesinden alın.


ZERO ölçümü gerektirmeyen cihazlarda buradan başlayın.

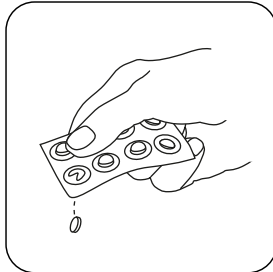


COPPER No. 1 tablet ilave edin.

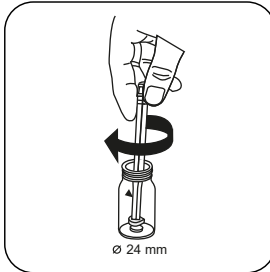


Tableti(tabletleri) hafifçe döndürerek ezin ve çözdürün.

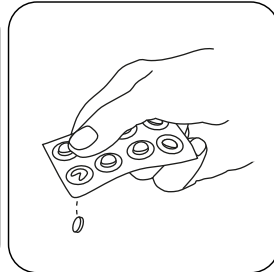


COPPER No. 2 tablet ilave edin.

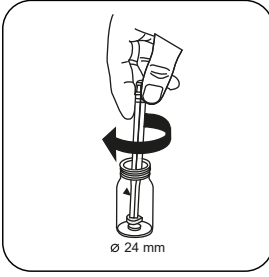


Tableti(tabletleri) hafifçe döndürerek ezin.

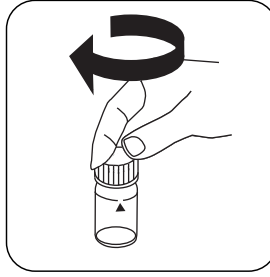


Küveti(küvetleri) kapatın.

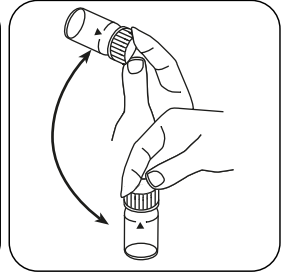


Tableti(tabletleri) sallayarak çözdürün.

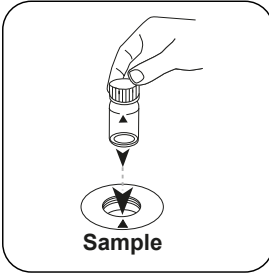

Numune küvetini ölçüm haznesine koyun. Doğru konumlandırılmasına dikkat edin.

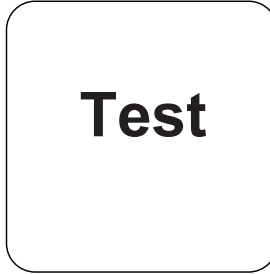

TEST (XD: START) tuşuna basın.

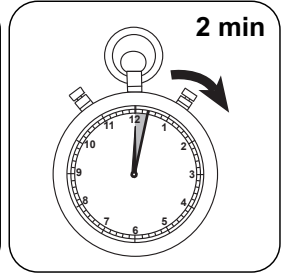

2 dakika tepkime süresi bekleyin.

Tepkime süresinin sona ermesinden sonra ölçüm otomatik gerçekleşir.

Ekranda sonuç mg/L toplam bakır cinsinden belirir.



Tespitin uygulanması Bakır, tabletlı ayrılaştırılmış tespit


Cihazda metot seçin.

Buna ek olarak tespiti seçin: ayrılmış


Bu yöntem için, aşağıdaki cihazlarda her seferinde SIFIR ölçümünün yapılması gerekmez: XD 7000, XD 7500




24 mm'lik küveti **10 mL numune** ile doldurun.

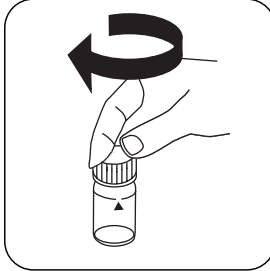


Küveti(küvetleri) kapatın.

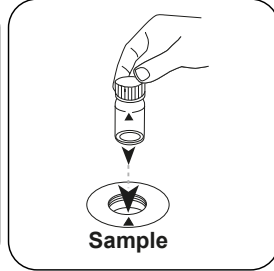

Numune küvetini ölçüm haznesine koyun. Doğru konumlandırılmasına dikkat edin.

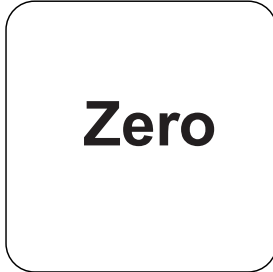


ZERO tuşuna basın.

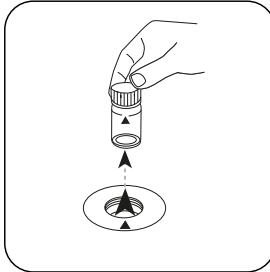


Küveti ölçüm haznesinden alın.


ZERO ölçümü gerektirmeyen cihazlarda buradan başlayın.

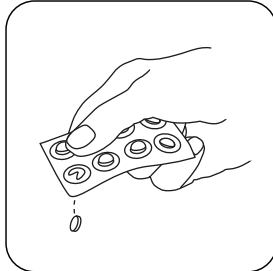


COPPER No. 1 tablet ilave edin.

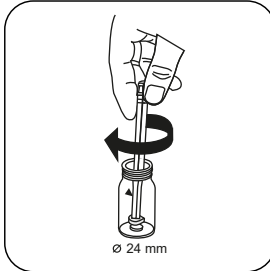


Tableti(tabletleri) hafifçe döndürerek ezin.

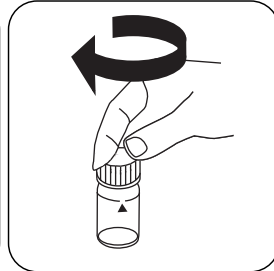


Küveti(küvetleri) kapatın.

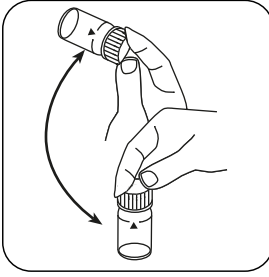


Tableti(tabletleri) sallayarak çözdürün.

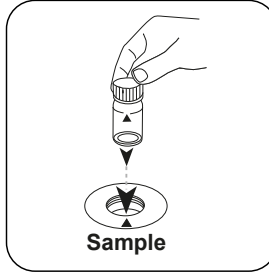


Numune küvetini ölçüm haznesine koyun. Doğru konumlandırılmasına dikkat edin.

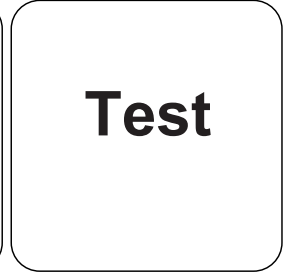


TEST (XD: **START**) tuşuna basın.

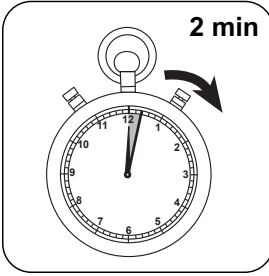


2 dakika tepkime süresi bekleyin.

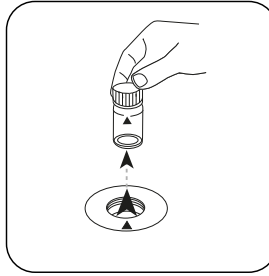


Küveti ölçüm haznesinden alın.

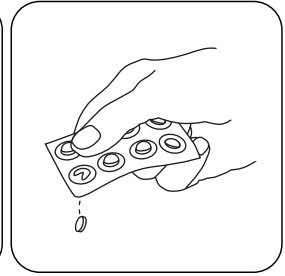


COPPER No. 2 tablet ilave edin.

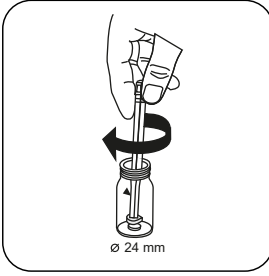




Tableti(tabletleri) hafifçe döndürerek ezin.

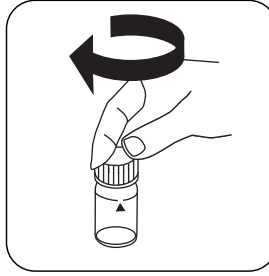

Küveti(küvetleri) kapatın.

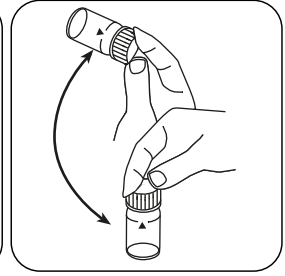

Tableti(tabletleri) sallayarak çözdürün.

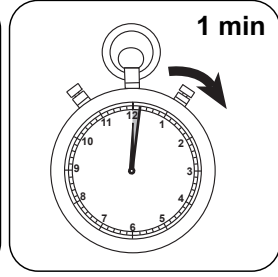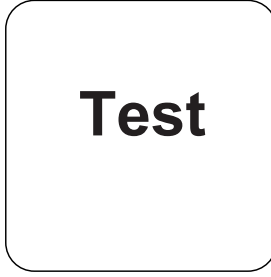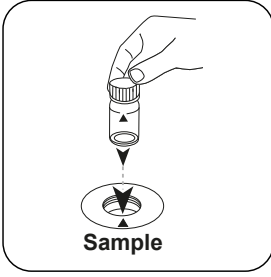

Numune küvetini ölçüm haznesine koyun. Doğru konumlandırılmasına dikkat edin.

TEST (XD: START) tuşuna basın.

1 dakika tepkime süresi bekleyin.

Tepkime süresinin sona ermesinden sonra ölçüm otomatik gerçekleşir.

Ekranda sonuç mg/L serbest bakır; bağlı bakır; toplam bakır cinsinden belirir.

Kimyasal Metod

Biquinoline

Aparandis

Üçüncü taraf fotometreler için kalibrasyon işlevi

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

	ø 24 mm	□ 10 mm
a	$-4.78562 \cdot 10^{-2}$	$-5.12445 \cdot 10^{-2}$
b	$3.79263 \cdot 10^{+0}$	$8.20998 \cdot 10^{+0}$
c		
d		
e		
f		

Girişim Metni

Kalıcı Girişimler

1. Siyanür CN⁻ ve Gümüş Ag⁺ maddeler tespiti bozar.

Yöntem Doğrulama

Algılama Limiti	0.05 mg/L
Belirleme Limiti	0.15 mg/L
Ölçüm Aralığı Sonu	5 mg/L
Hassasiyet	3.8 mg/L / Abs
Güven Aralığı	0.026 mg/L
Standart Sapma	0.011 mg/L
Varyasyon Katsayısı	0.42 %

Bibliyografi

Photometrische Analyse, Lange/Vedjelek, Verlag Chemie 1980

^{a)} Serbest, bağlı ve toplam değerler belirlenmesi | * karıştırma çubuğu dahil