



Cloro PP

M110

0.02 - 2 mg/L Cl<sub>2</sub> <sup>a)</sup>

CL2

DPD

## Informação específica do instrumento

O teste pode ser realizado nos seguintes dispositivos. Além disso, a cubeta necessária e a faixa de absorção do fotômetro são indicadas.

Dispositivos	Cuvette	$\lambda$	Faixa de Medição
MD50, MD 100, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	ø 24 mm	530 nm	0.02 - 2 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	510 nm	0.02 - 2 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>

## Material

Material necessário (parcialmente opcional):

Reagentes	Unidade de Embalagem	Código do Produto
Sem cloro DPD F10	Pó / 100 pc.	530100
Sem cloro DPD F10	Pó / 1000 pc.	530103
Cloro Total DPD F10	Pó / 100 pc.	530120
Cloro Total DPD F10	Pó / 1000 pc.	530123

## Padrões disponíveis

Título	Unidade de Embalagem	Código do Produto
ValidCheck Cloro 1,5 mg/l	1 pc.	48105510

## Lista de Aplicações

- Tratamento de Esgotos
- Controle de Desinfecção
- Água de Caldeira
- Água de Refrigeração
- Tratamento de Água Bruta
- Controle de Água de Piscina
- Tratamento de Água Potável

## Amostragem

1. Na preparação da amostra é preciso evitar a libertação de gases de cloro, p. ex. através da pipetagem e agitação.
2. A análise tem de ser efetuada logo após a recolha da amostra.

## Preparação

1. Limpeza das células:  
Uma vez que muitos produtos de limpeza domésticos (p. ex. lava-louça) contêm substâncias redutoras, na determinação de cloro pode haver demasiadas reduções. Para excluir este erro de medição, os equipamentos de vidro não deviam ter a capacidade de absorção de cloro. Para esse efeito, os equipamentos de vidro são guardados por uma hora sob solução de hipoclorito de sódio (0,1 g/L) e depois devem ser bem enxaguados com água desmineralizada.
2. Para a determinação individual de cloro livre e cloro total é conveniente usar respetivamente um conjunto próprio de células (ver EN ISO 7393-2, alínea 5.3).
3. A formação de cores DPD ocorre com um valor pH entre 6,2 e 6,5. Os reagentes contêm, por isso, um tampão para ajustar o valor pH. As águas fortemente alcalinas ou ácidas devem, porém, antes da análise, ser ajustadas para um valor pH entre 6 e 7 (com 0,5 mol/l de ácido sulfúrico ou 1 mol/l soda cáustica).



## Realização da determinação Cloro livre com pacotes de pó


Escolher o método no equipamento.

Escolha ainda a determinação: livre


Para este método, uma medição ZERO não precisa ser realizada todas as vezes nos seguintes dispositivos: XD 7000, XD 7500




Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.

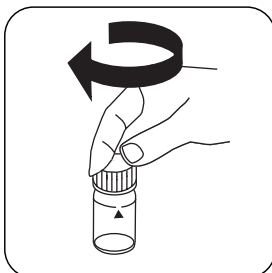


Fechar a(s) célula(s).

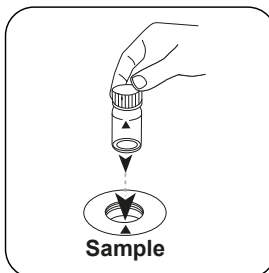

Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

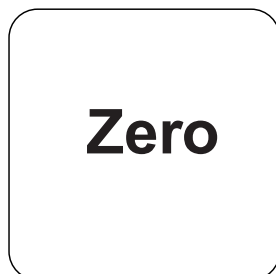


Premir a tecla **ZERO**.

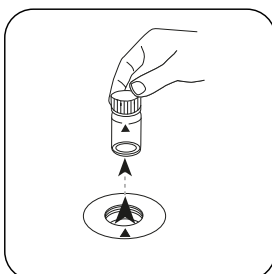


Retirar a célula do compartimento de medição.


Nos equipamentos que **não requerem uma medição ZERO**, deve começar aqui.

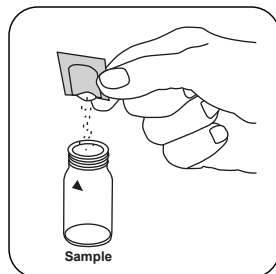



Adicionar um **pacote de pó Chlorine FREE-DPD/ F10**.

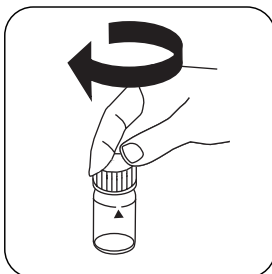

Fechar a(s) célula(s).

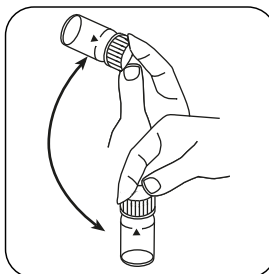

Misturar o conteúdo girando (20 sec.).

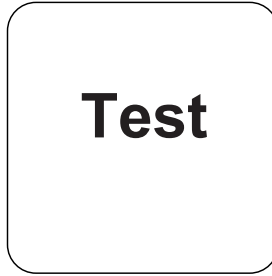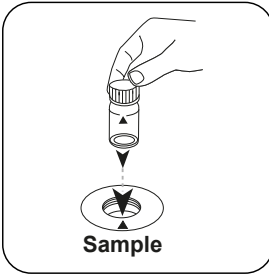

Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

Premir a tecla **TEST** (XD: **START**).

No visor aparece o resultado em mg/L Cloro livre.



## Realização da determinação Cloro total com pacotes de pó


Escolher o método no equipamento.

Escolha ainda a determinação: total


Para este método, uma medição ZERO não precisa ser realizada todas as vezes nos seguintes dispositivos: XD 7000, XD 7500




Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.

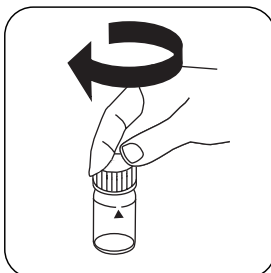


Fechar a(s) célula(s).

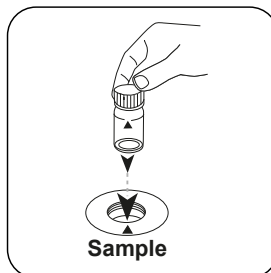

Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

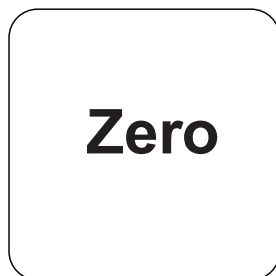


Premir a tecla **ZERO**.

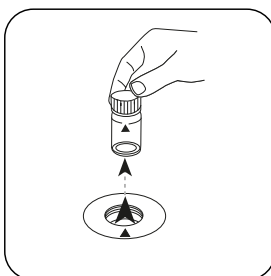


Retirar a célula do compartimento de medição.


Nos equipamentos que **não requerem uma medição ZERO**, deve começar aqui.

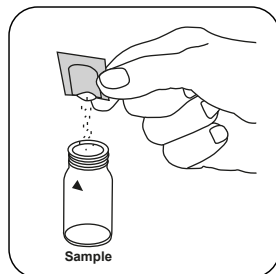


Adicionar um **pacote de pó Chlorine TOTAL-DPD/ F10**

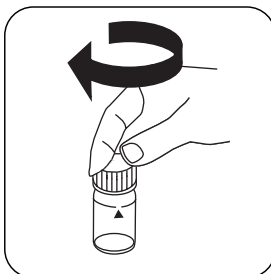


Fechar a(s) célula(s).

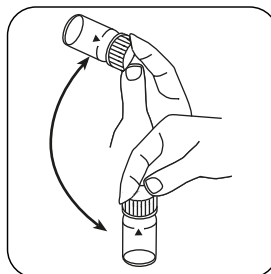


Misturar o conteúdo girando (20 sec.).

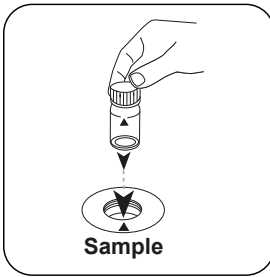

Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

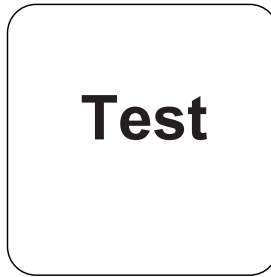

Premir a tecla **TEST** (XD: **START**).

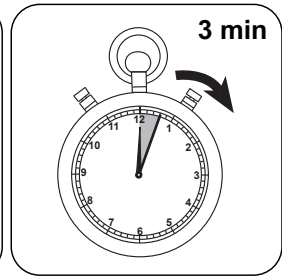

Aguardar **3 minuto(s) de tempo de reação**.

Decorrido o tempo de reação, a medição é efetuada automaticamente.

No visor aparece o resultado em mg/L Cloro total.



## Realização da determinação Cloro diferenciado com pacotes de pó


Escolher o método no equipamento.

Escolha ainda a determinação: diferenciado


Para este método, uma medição ZERO não precisa ser realizada todas as vezes nos seguintes dispositivos: XD 7000, XD 7500




Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.

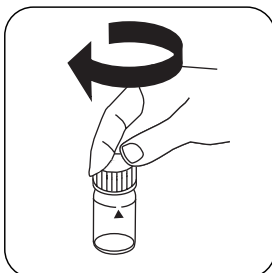


Fechar a(s) célula(s).

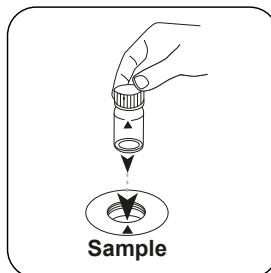

Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

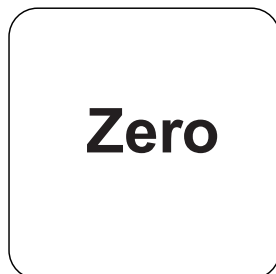


Premir a tecla **ZERO**.

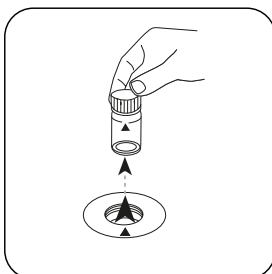


Retirar a célula do compartimento de medição.


Nos equipamentos que **não requerem uma medição ZERO**, deve começar aqui.

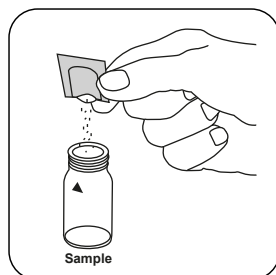


Adicionar um **pacote de pó Chlorine FREE-DPD/ F10**.

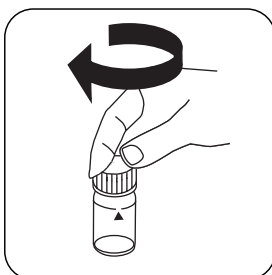


Fechar a(s) célula(s).

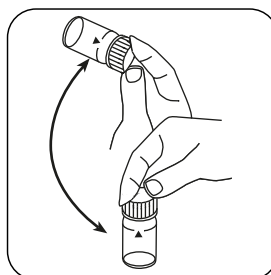


Misturar o conteúdo girando (20 sec.).

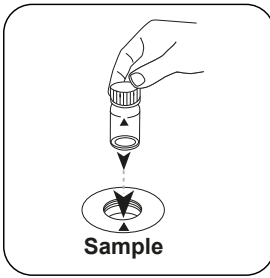


Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

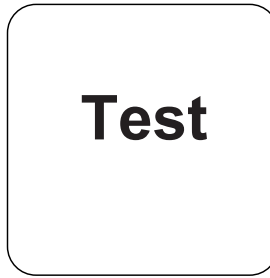

Premir a tecla **TEST** (XD: **START**).

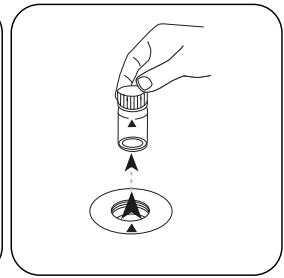


Retirar a célula do compartimento de medição.

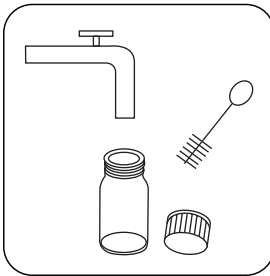


Limpar bem a célula e a tampa da mesma.




Encher a célula de 24 mm com **10 mL de amostra**.

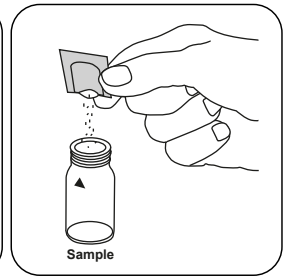


Adicionar um **pacote de pó TOTAL-DPD/ F10**.

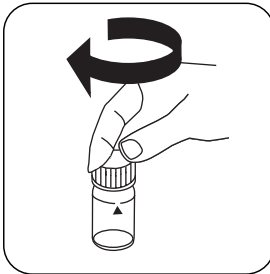

Fechar a(s) célula(s).

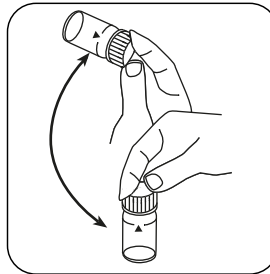

Misturar o conteúdo girando (20 sec.).

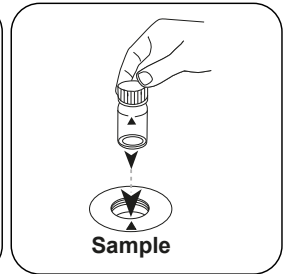


Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.





# Test

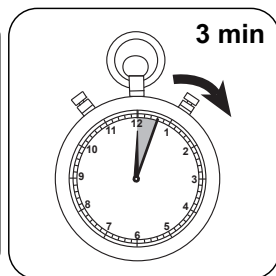

Premir a tecla **TEST** (XD: **START**).

Aguardar **3 minuto(s)** de **tempo de reação**.

Decorrido o tempo de reação, a medição é efetuada automaticamente.

No visor aparece o resultado em mg/L Cloro livre, mg/l Cloro combinado, mg/l Cloro total.

## Método Químico

DPD

## Apêndice

### Função de calibração para fotômetros de terceiros

Conc. = a + b•Abs + c•Abs<sup>2</sup> + d•Abs<sup>3</sup> + e•Abs<sup>4</sup> + f•Abs<sup>5</sup>

	ø 24 mm	□ 10 mm
a	-3.94263•10 <sup>-2</sup>	-3.94263•10 <sup>-2</sup>
b	1.70509•10 <sup>+0</sup>	3.66594•10 <sup>+0</sup>
c		
d		
e		
f		

### Texto de Interferências

#### Interferências Persistentes

- Todos os oxidantes presentes nas amostras reagem como o cloro, o que leva a resultados demasiado altos.

#### Interferências Removíveis

- As interferências por cobre e ferro(III) devem ser eliminadas por EDTA.
- Concentrações de cloro superiores a 2 mg/L, se forem usados pacotes de pó, podem causar resultados dentro da área de medição até 0 mg/L. Neste caso, deve diluir a amostra com água sem cloro. 10 ml da amostra diluída é colocada em reagente e a medição é repetida (teste de plausibilidade).

Interferências	a partir de / [mg/L]
CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	0,01
MnO <sub>2</sub>	0,01



## Validação de método

<b>Limite de Detecção</b>	0.01 mg/L
<b>Limite de Determinação</b>	0.03 mg/L
<b>Fim da Faixa de Medição</b>	2 mg/L
<b>Sensibilidade</b>	1.68 mg/L / Abs
<b>Faixa de Confiança</b>	0.033 mg/L
<b>Desvio Padrão</b>	0.014 mg/L
<b>Coefficiente de Variação</b>	1.34 %

### Conformidade

EN ISO 7393-2

<sup>a</sup>Determinação do possível livre, vinculado, total