

TOC LR M. TT

M380

5 - 80 mg/L TOC^{b)}H₂SO₄ / Persulphate / Indicator

儀器的具體信息

測試可以在以下設備上執行。此外還指出了所需的比色皿和光度計的吸收範圍。

儀器类型	比色皿	λ	測量范围
MD 600, MD 610, MD 640, XD 7000, XD 7500	ø 16 mm	610 nm	5 - 80 mg/L TOC ^{b)}
SpectroDirect	ø 16 mm	596 nm	5 - 80 mg/L TOC ^{b)}

材料

所需材料 (部分可選) :

试剂	包装单位	货号
TOC Spectroquant 1.14878.0001 比色杯测试 ^{d)}	25 片	420761

它還需要以下配件。


附件	包装单位	货号
热反应器 RD 125	1 片	2418940
螺帽 TOC	1 组	420757

应用列表

- 饮用水处理
- 污水处理
- 原水处理

准备

1. 执行测试之前，请一定仔细阅读随货的原说明书和安全建议 (MSDS 文件请访问网址 www.merckmillipore.com 获取)。

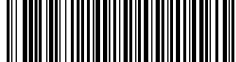

备注

1. 此方法源自MERCK。
2. Spectroquant® 是 MERCK KGaA 公司的注册商标。
3. 在整个操作过程中应采取适当的安全措施和良好的实验室技术。
4. 样品的体积应使用容量的移液管量取 (A级)。
5. TOC = Total Organic Carbon 总有机碳
6. 铝盖可以重复使用 (参见 Merck) 。
7. 由于比色皿高度较大，XD 设备的测量轴盖无法完全关闭。这不会影响测量。



进行测定 MERCK Spectroquant® 比色杯测试的 TOC LR，编号 1.14878.0001


选择设备中的方法。

对于此方法，不必每次都在以下设备上进行零测量：XD 7000, XD 7500


对于这种方法，在以下设备上不能进行 ZERO 测量：

准备两个干净合适的玻璃器皿。将一个玻璃器皿标记为空白样本。


1. 在空白样本中加入 **25 mL 去离子水**。
2. 在样本容器中加入 **25 mL 样本**。
3. 加入 **3 滴 TOC-1K 试剂**并混合。
4. 样本的 pH 值应在 2.5 以下。如有必要，用硫酸调节。
5. 中速搅拌 **10 分钟**。（磁力搅拌器，搅拌棒）

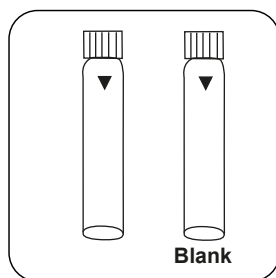


准备两个试剂比色杯。将一个比色杯标记为空白比色杯。

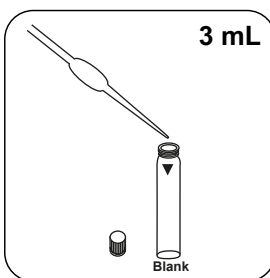


加入 **3 mL** 准备好的空白样本到空白比色杯中。

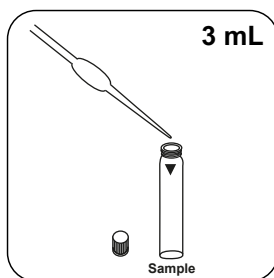


加入 **3 mL** 样本到样本比色杯中。

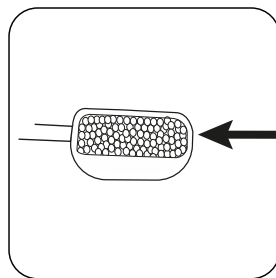



各加入一微勺 **TOC-2K**。

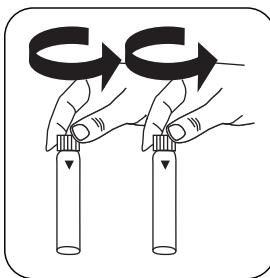


用铝盖立即密封比色杯。

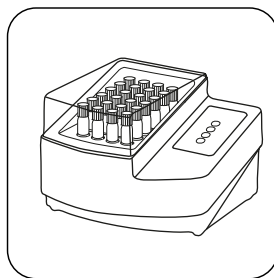


在预热的热反应器中，将比色杯在 **120 °C** 下倒置加热 **120 分钟**。

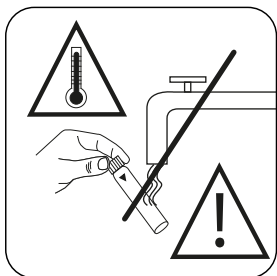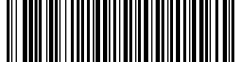


将比色杯倒置 1 小时冷却。
不用水冷却！冷却后翻过来，
10 分钟内 在光度计中测量。

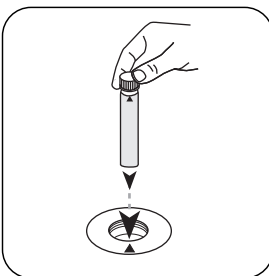


将空白比色杯放入测量轴中。
注意定位。

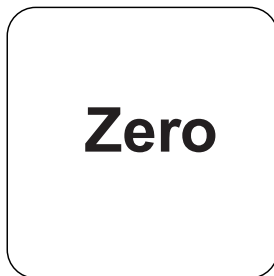


按下 **ZERO** 按钮。

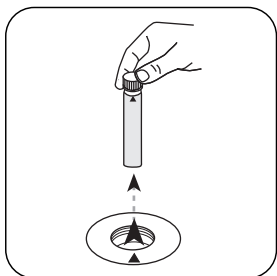

从测量轴上取下比色杯。

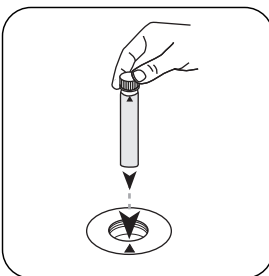

将样本比色杯放入测量轴中。
注意定位。

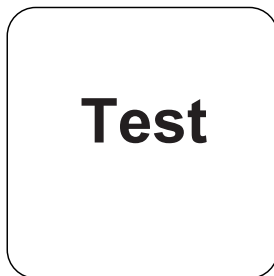

按下 **TEST (XD: START)** 按钮。

结果在显示屏上显示为 mg/l TOC 。



化学方法

H₂SO₄ / Persulphate / Indicator

附錄

第三方光度计校准功能

Conc. = a + b•Abs + c•Abs² + d•Abs³ + e•Abs⁴ + f•Abs⁵

ø 16 mm	
a	9.84368 • 10 ⁻¹
b	-3.32135 • 10 ⁻¹
c	-2.14517 • 10 ⁻¹
d	
e	
f	

源于

EN 1484:1997
标准方法 5310 C

^{b)} 消解器对于以下分析是必须的：COD (150 °C), TOC (120 °C) 总铬，总磷，总氮 (100 °C) | ^{c)} Spectroquant®为Merck KGaA的注册商标